



版本号: MP260101

Proteo Pre-stained Protein Marker (10-180 kDa)

Proteo 三色预染蛋白质Marker (10-180 kDa)

目 录 号: MP211

储存条件: -30~-15°C储存, 2-8°C可存放2个月。

产品内容:

Proteo 三色预染蛋白质Marker
(Pre-stained Protein Marker)

250 µl
(50 lanes)

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品含有11种预染的蛋白质分子量标准, 分子量范围为10-180 kDa, 分子量大小分别为180 kDa, 130 kDa, 100 kDa, 72 kDa, 50 kDa, 40 kDa, 30 kDa, 25 kDa, 20 kDa, 15 kDa, 10 kDa, 其中25 kDa条带为绿色, 72 kDa条带为橙红色。三色预染蛋白质Marker可以直接观察并判断蛋白电泳及Western Blot转膜的效果。


使用说明

使用前请将三色预染蛋白质Marker置于室温数分钟融化后, 轻轻混匀即可上样, 无需煮沸加热。取5-10 µl Marker加入到凝胶孔中, 可根据实际情况适当调整Marker用量。该产品适用于蛋白质凝胶电泳和蛋白质转膜等实验。

注意事项

1. 该产品含SDS, 不适合用于非变性胶。
2. 建议开封后分装保存, 避免反复冻融。
3. 电泳时间不宜过长, 以防止发生条带发散现象。
4. 建议使用时请佩戴一次性手套操作,

条带示例

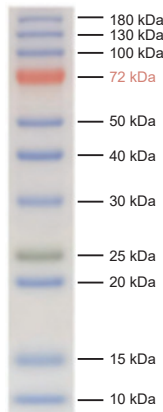

12% Tris-Glycine SDS-PAGE