

# 180 kDa Prestained Protein Marker

MP102

Version 20.1



## 产品概述

180 kDa Prestained Protein Marker由10种预染蛋白质组成，分子量范围为10 kDa - 180 kDa。其中70 kDa为红色条带，15 kDa、25 kDa、35 kDa、40 kDa、55 kDa、100 kDa、130 kDa、180 kDa为蓝色条带，10 kDa为绿色条带。

由低到高的分子量范围可动态观察蛋白质电泳状态并清晰地判断目标蛋白的分子量，同时经SDS-PAGE电泳后转移到PVDF膜（或NC膜）上可见清晰的彩色条带，进而监测Western Blot实验中的转膜效率。本品推荐上样量为5  $\mu$ l。

## 产品组分

| 组 分                               | MP102-01 (100 rxns, 5 $\mu$ l/rxn) | MP102-02 (500 rxns, 5 $\mu$ l/rxn) |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 180 kDa Prestained Protein Marker | 2 $\times$ 250 $\mu$ l             | 10 $\times$ 250 $\mu$ l            |

## 保存条件

-30 ~ -15 $^{\circ}$ C保存，冰袋运输，有效期2年；经常使用可置于4 ~ 8 $^{\circ}$ C保存，有效期3个月，建议分装保存，避免反复冻融。

## 适用范围

本产品适用于SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳实验及免疫印迹实验。


## 注意事项

本产品包装方便，无需加热，稀释或使用其他还原剂即可使用。

1. 在免疫印迹实验中，产品中的大分子蛋白（>100 kDa）可能需要更长的转移时间或转移电流，才能完成转移。
2. 预染蛋白条带与蛋白结合后在不同的SDS-PAGE缓冲液中具有不同的迁移率。在低浓度的凝胶（<10%）中，低分子量蛋白条带可能会随染料迁移，在用于判断目的蛋白分子量时仅供参考。
3. 为了您的健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
4. 建议使用12%分离胶进行电泳。

## 实验流程

1. 本品为即用型产品。加样前，室温放置数分钟解冻后，轻轻摇匀，以确保溶液混合均匀；
2. 取5  $\mu$ l该样品至凝胶点样孔中进行聚丙烯酰胺凝胶电泳（若点样孔较宽，可适当增加上样量）。

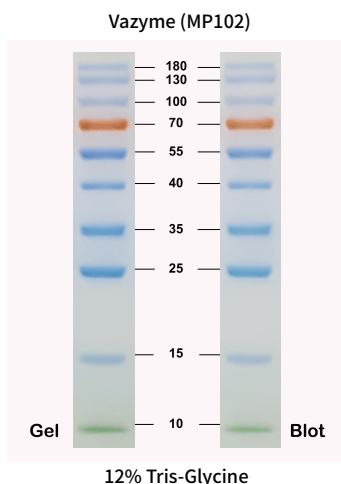

\*所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。