

250 kDa Plus Prestained Protein Marker

MP202

Version 23.1



产品概述

250 kDa Plus Prestained Protein Marker由三种颜色预染的11种不同分子量大小的蛋白质组成，分子量范围为12 - 250 kDa。其中70 kDa为橙红色条带，12 kDa、15 kDa、20kDa、35 kDa、40 kDa、55 kDa、100 kDa、130 kDa、250 kDa为蓝色条带，25 kDa为绿色条带。本产品用于SDS-PAGE实验中，可清晰地指示电泳进程，较为准确地判断目标蛋白的分子量；在Western blot实验中，可用于监测PVDF膜或NC膜的转膜效果以及判断目标蛋白的检测情况；本产品可应用于Tris-Glycine胶和Bis-Tris胶的不同缓冲液体系(Tris-Glycine、MOPS和MES)，本产品的蛋白条带均经非预染蛋白Marker校准，条带大小准确。本品推荐上样量为5 μ l。

产品组分

组 分	MP202-01 (100 rxns)	MP202-02 (500 rxns)
250 kDa Plus Prestained Protein Marker	2 $\times$ 250 μ l	10 $\times$ 250 μ l

保存条件

-30 ~ -15 $^{\circ}$ C保存， $\leq$ 0 $^{\circ}$ C运输。

适用范围

适用于SDS-PAGE实验及Western blot实验。

注意事项

本产品仅供科学研究使用，不得用于临床医学诊断及其他非合理用途。

1. 本产品使用方便，无需加热、稀释或添加其他还原剂。
2. 在Western blot实验中，大分子蛋白(>100 kDa)可能需要更长的转移时间或更高的转移电流，才能完成转移。
3. 预染蛋白Marker在不同的SDS-PAGE缓冲液中具有不同的迁移率，在用于判断目的蛋白分子量时仅供参考。
4. 为了您的健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
5. 推荐使用12%分离胶进行电泳。

实验流程

1. 本品为即用型产品。加样前，室温放置数分钟解冻后，轻轻摇匀，以确保溶液混合均匀，瞬时离心后使用。
2. 取5 μ l该样品至点样孔中进行凝胶电泳(若点样孔较宽或凝胶较厚，可适当增加上样量)。

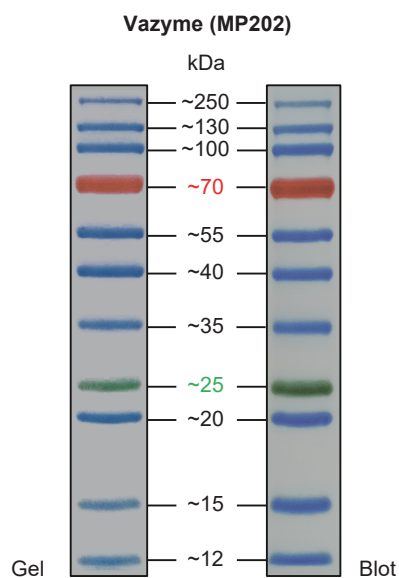


Fig 1. MP202的SDS-PAGE胶和PVDF转膜效果

Gel type		Tris-Glycine					Bis-Tris					
Gel concentration		6%	8%	10%	12%	15%	4 - 12%		10%		12%	
Running buffer		Tris-Glycine					MOPS	MES	MOPS	MES	MOPS	MES
% length of gel	0%											
	10%		250	250	250	250	235	235	235	235	235	235
	20%	250	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	30%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	40%	130		70	70	70	65	65	65	65	65	65
	50%	100	70	55	55	55	51	51	51	51	51	51
	60%		55	40	40	40	43	43	43	43	43	43
	70%	70	40	35	35	35	29	29	29	29	29	29
	80%	55	35	25	25	25	23	23	23	23	23	23
	90%	40	25	20	20	20	19	19	19	19	19	19
	100%						12	12	12	12	12	12

Fig 2. MP202在不同电泳条件下的迁移模式